

DualPRO

Sistema de impresión
de plantillas 3D


Herbitas
Laboratorios

newfeet



Alto rendimiento. **Máxima rentabilidad.**

Hardware optimizado de alto rendimiento.

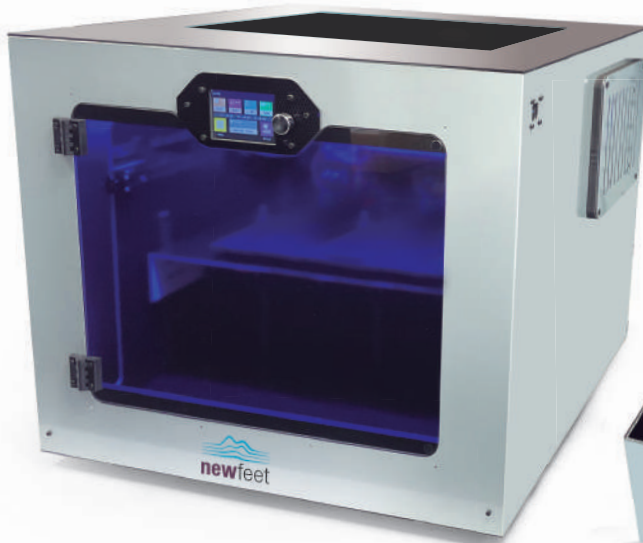

Impresora y escáner | 21.113.77

La impresora 3D Newfeet DualPRO realiza la impresión de plantillas personalizadas de forma rápida y autónoma.

Las plantillas se adaptan a todo tipo de pacientes.



Impresión horizontal

Indicada para plantillas pie de riesgo y uso diario. Realiza plantillas con arco macizo. Permite impresión de plantillas tanto 3/4 como completas. El resultado será una plantilla blanda o semirrígida. Es posible realizar cambio de densidades en cualquier zona de la plantilla.



Impresión vertical


Especialmente indicada para plantillas correctoras de niños y para la práctica deportiva. Permite realizar plantillas finas, estando el arco interno al aire. El resultado será una plantilla 3/4 rígida o semirrígida con estabilización de talón. Este sistema permite imprimir dos pares al mismo tiempo.

DualPRO
Sistema de impresión
de plantillas 3D



Producción autónoma

Pantalla LCD Dual Touch
para el control de
múltiples opciones.

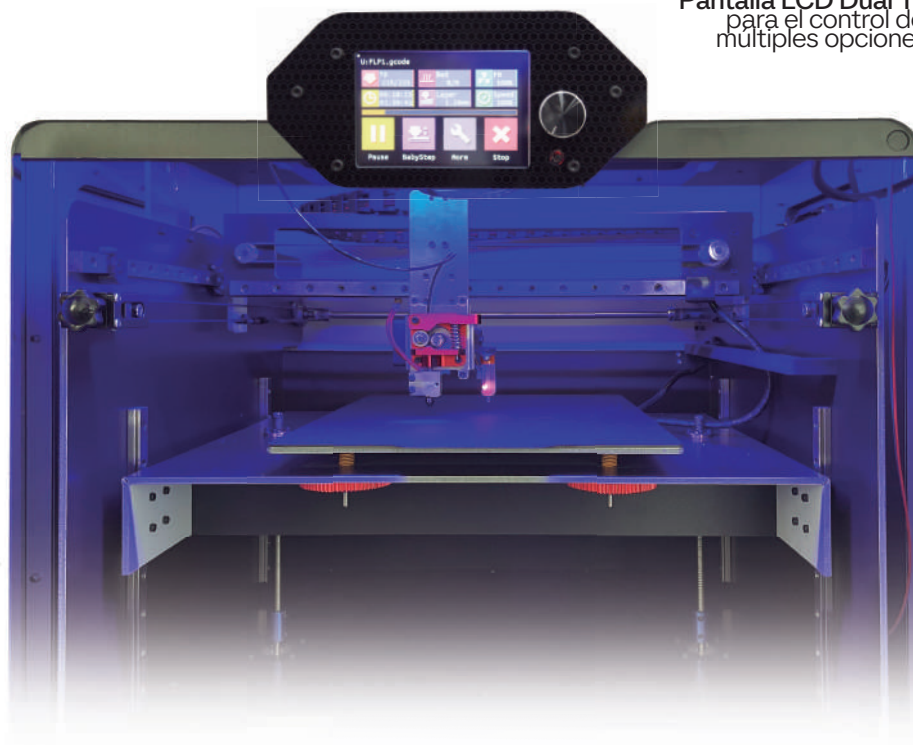

● Alta durabilidad

Producción final a medida y de alta resistencia.

● Espacio de trabajo protegido

Producción sin residuos y libre de polvo.

● Réplicas exactas

Clonación de plantillas con total exactitud.

● Optimización de los tiempos de producción

Mayor volumen de producción en menor tiempo.



Fabricado en España



Cero residuos



2 años de garantía




Software Newfeet.

Desde la exploración al diseño final
en un solo clic.

Newfeet DualPRO incorpora un software mejorado que permite la creación de las plantillas de forma automática con la máxima garantía de adaptación.

**Versión
estándar**

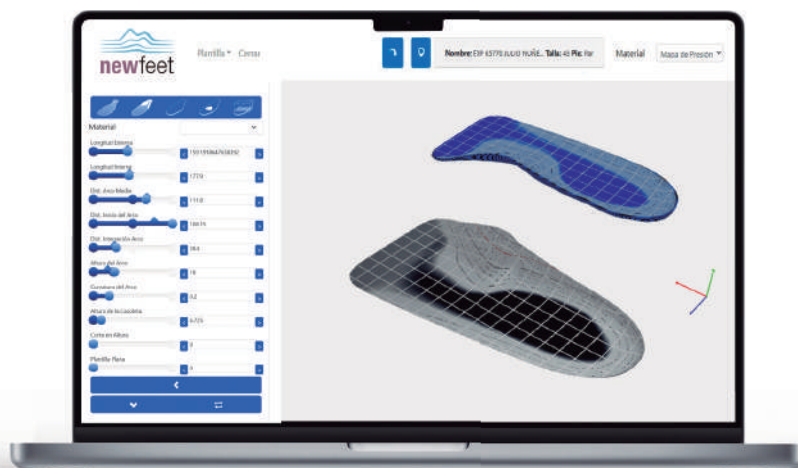

- **Plantillas vectorizadas**

Aseguran la precisión en el diseño final.

- **Intuitivo y sencillo**

Alta facilidad de uso e interacción sencilla y satisfactoria.

- **Sistema de imágenes HQ único en el mercado**

Representación novedosa y óptima de los pasos de ejecución previa a la producción.


DualPRO
Sistema de impresión
de plantillas 3D



**Versión
Premium**
opcional


Con ampliación de las capacidades y funcionalidades:

- **Ficha completa del paciente.**
- **Permite adjuntar archivos.**
- **Perfil**
- **Anamnesis**
- **Consultas**
- **Test Plantillas**
- **Agenda clínica**

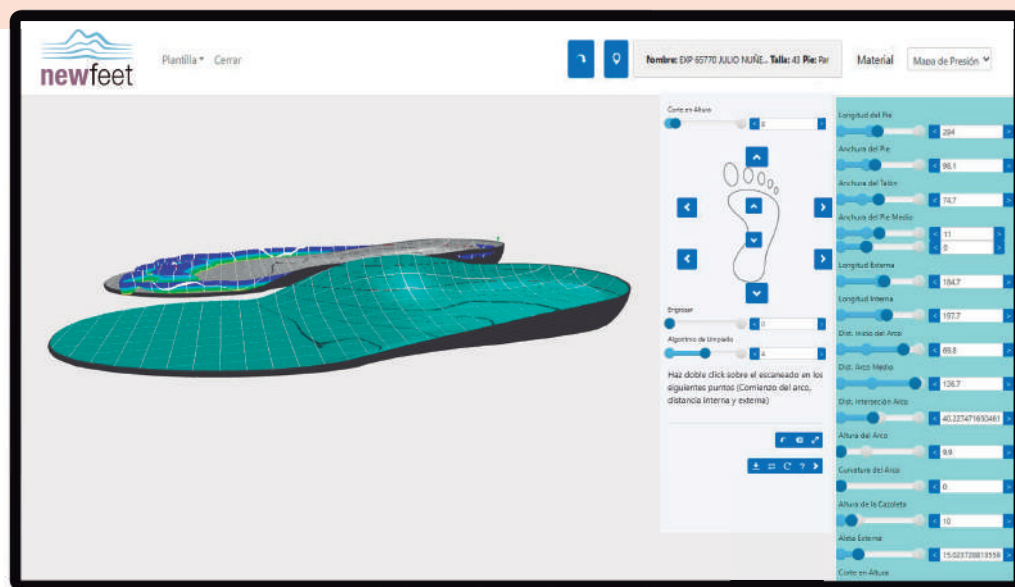

Fotografía métrica*


El software **Newfeet** genera automáticamente una horma sobre la imagen obtenida de la palmilla del zapato del cliente, proporcionando un ajuste perfecto al pie del paciente.

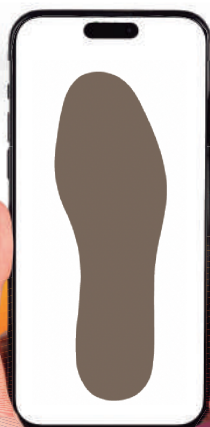


* Disponible solo en la versión Premium

Escáner con calidad de imagen texturizada


Los escáneres **Newfeet** incorporan un procesador que permite generar imágenes con mayor rapidez y calidad. Resolución de 5MP 2592 x 1944.

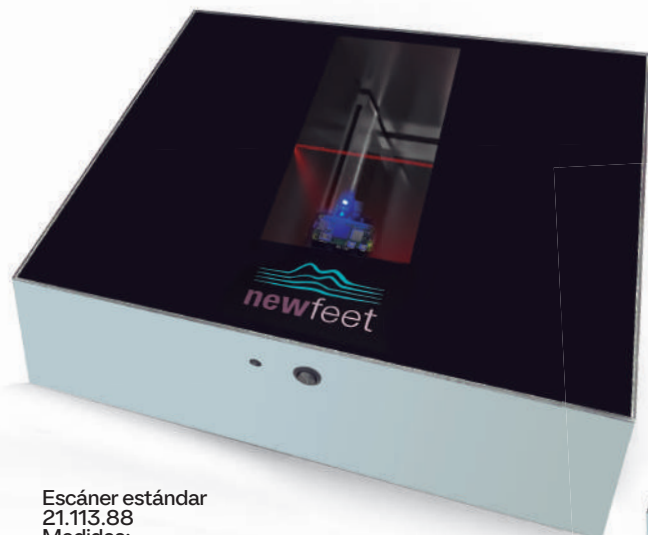

Escáner estándar
21.113.88
Medidas:
50,5 x 53,5 x 15,5 cm
Peso: 9 kg

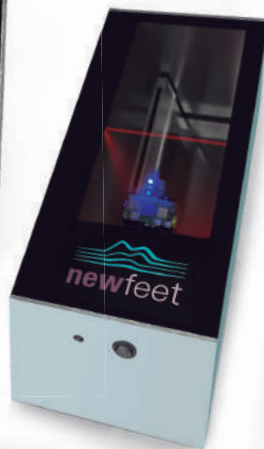

Escáner portátil
21.113.89
Medidas:
27 x 53,5 x 15,5 cm
Peso: 5,5 kg

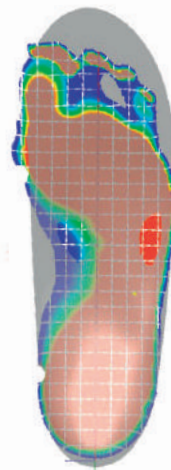


Escaneado DUAL
Textura+3D.
**Realista.
Impactante**

Función podoscopio digital 3d

Examina con gran detalle la estructura de la planta del pie. Posibilita su almacenamiento, lo que permite consultar las pruebas realizadas en posteriores ocasiones, cosa que en los podoscopios convencionales no es posible.

Permite el escaneado de espumas fenólicas.

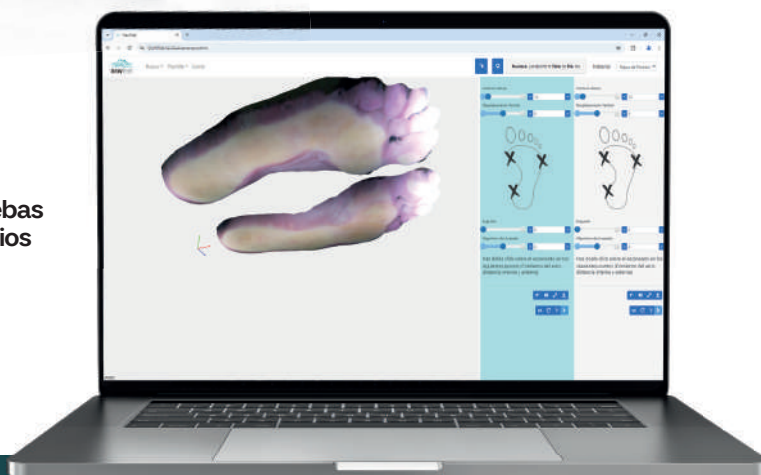

Fabricado
en España



Conexión
wifi



2 años de
garantía

Filamento de alta calidad.

El equilibrio perfecto entre resistencia, confort y flexibilidad.



Filamentos Skynny Pro

Fabricamos la gama completa de filamentos Skynny Pro, garantizando el cumplimiento de todos los requerimientos de calidad ligados a las propiedades mecánicas de durabilidad, flexibilidad y confort exigidas a las plantillas podológicas.

Nuestra tecnología avanzada y los materiales de alta calidad, aseguran la precisión en la impresión para satisfacer las exigencias más rigurosas de diseño y funcionalidad.



● Estándar

Indicado para plantillas de uso diario y confort.

● Rígido

Indicado para plantillas correctoras y de deporte.

● Blando

Indicado para pie de riesgo.



● Múltiples densidades

● Excelente memoria

● Ligereza y transpirabilidad



● Durabilidad y flexibilidad

DualPRO

Sistema de impresión
de plantillas 3D

Herbitas
Laboratorios

newfeet

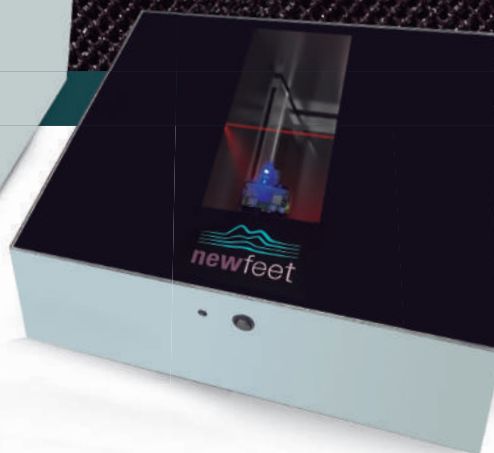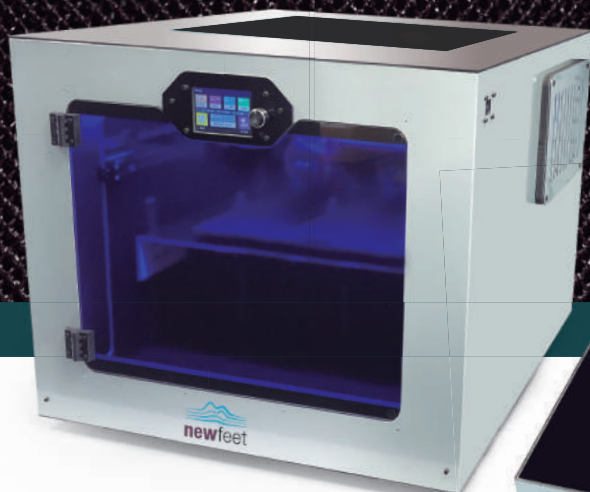

Herbitas
Laboratorios

STEP TO THE FUTURE

Laboratorios Herbitas S.L.
Periodista Badía, 13B
46134 Foios (Valencia). España
Tel.: +034 963627900
herbitas@herbitas.com

herbitas.com



Descubre DualPro

Las imágenes, indicaciones y características de
este folleto son orientativas y no tienen carácter
contractual.
Fecha Impresión: Octubre 2025
REF: 222N