

# Ortesis para control Genu-Recurvatum

D50



NEW  
design

## Sencillamente natural

Una nueva versión con beneficios  
únicos y un diseño discreto,  
moderno y actual: la solución  
más idónea para el control de la  
hiperextensión de la rodilla.



**Combi-Force  
Control**




## ¿Cómo actúa?

Controla la hiperextensión de la rodilla mediante la **combinación de fuerzas** ejercidas entre la estructura y el **ajuste individualizado** de sus 5 cinchas. Limita la extensión e impide la posición en recurvatum.



**Combi-Force Control**

## Factores que intervienen en la correcta estabilización de la rodilla

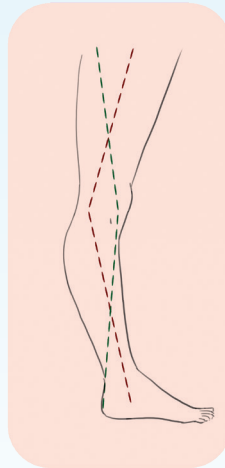

Fuerza sujeción ortesis

Fuerza corrección zona poplítea

Fuerza sujeción ortesis

Fuerza estabilización

Fuerza estabilización



**Estructura exclusiva con forma de H curvada.**


Ligera y cómoda.



**1 Almohadillado protector comfortable** que alivia las zonas de presión y libera tensiones.

**2 Cincha posterior de corrección graduable** con almohadilla ergonómica que se adapta cómodamente al hueso poplíteo actuando como tope.

**3 Diseño en una sola talla.** Canal de regulación que permite adaptar la órtesis al perímetro de pierna de cada paciente, de forma fácil y sencilla.

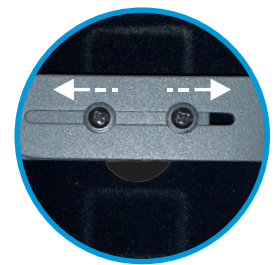

**4 Articulación integrada** que permite la flexión de la rodilla y favorece la adaptabilidad.

**5 Cinchas de adaptación** con diseño anti-estrangulación, terminadas en microvelcro y cierres cocodrilo, que permiten personalizar el rango de ajuste de manera segura.

