



*Nuevas tallas.  
Mejor adaptación*

# **Humerux**

*Ortesis de húmero*




**traction**  
system®

*Máximo control*

Nuevas tallas. Mejor adaptación

# Humerux

Ortesis de húmero

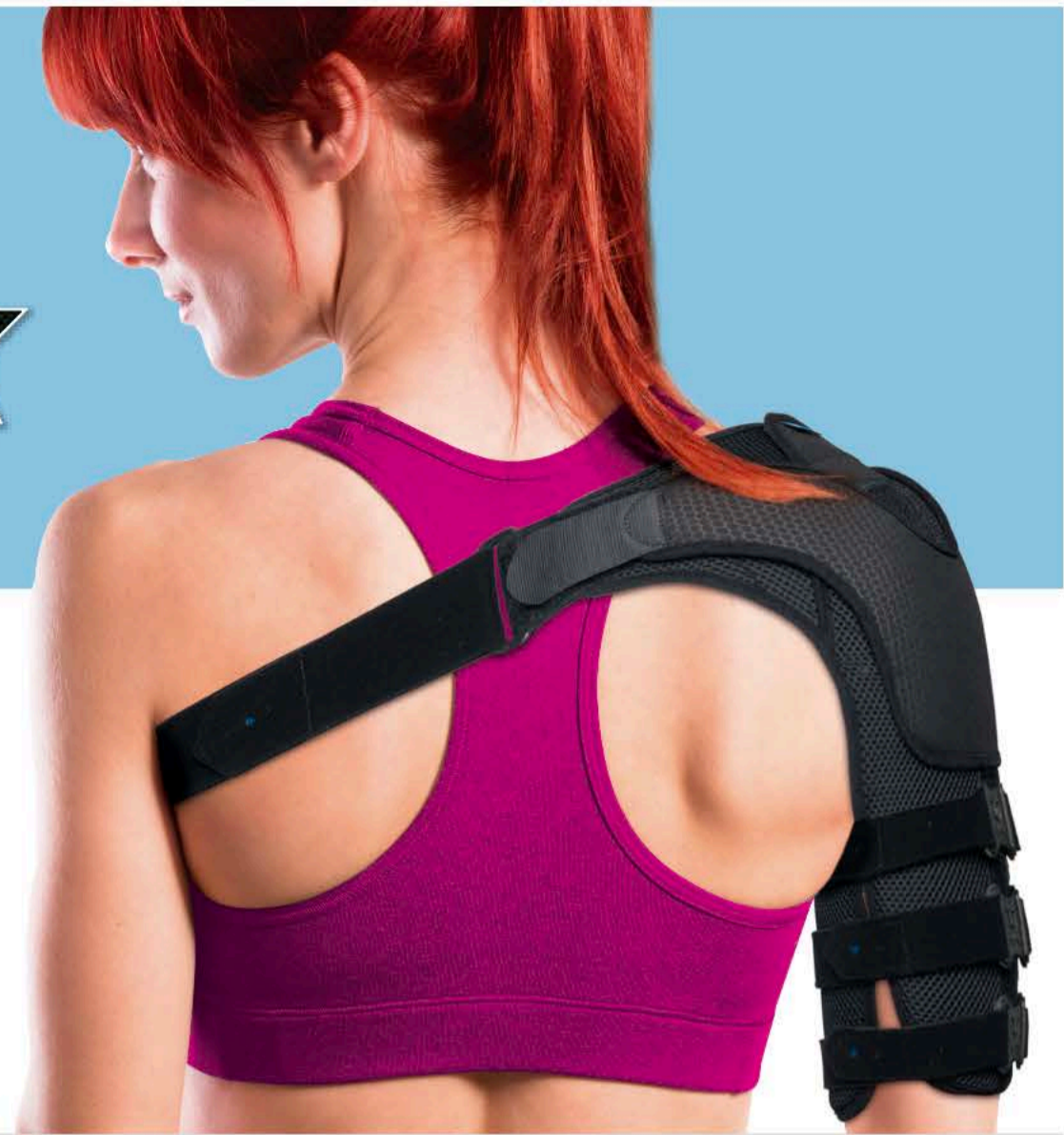

**HUMERUX** es una nueva ortesis que ofrece el máximo control en las lesiones de húmero, gracias a su innovador sistema de tracción.

Indicada para el tratamiento de las fracturas diafisarias de húmero, tratamiento post-quirúrgico de las fracturas y control de la inestabilidad del foco de fracturas durante el proceso de consolidación.




**traction system**

Máximo control

**Sistema Y-traction, mediante galápago de tracción**, que permite incrementar y ajustar la tensión: ayuda a maximizar el control sobre la alineación, fijación e inmovilización del húmero.

**Tejido técnico acolchado y transpirable:** cómodo y respetuoso con la piel.

100% LATEX FREE

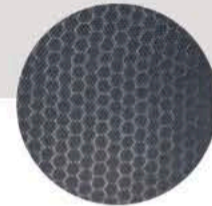

**Valvas y cinchas estabilizan el húmero** aplicando una compresión uniforme y personalizada a los tejidos blandos circundantes.

**Cincha pectoral:** impide que la ortesis se deslice hacia abajo. Incorpora un soporte almohadado que se adapta cómodamente a la axila evitando cualquier tipo de roce o molestia.

**Estructura bivalva con placas termoconformadas** de PE de alta densidad, extraíbles: pueden conformarse mediante calor\* para su adaptación anatómica al paciente.

\*Las valvas pueden conformarse con pistola de calor a 150 grados a unos 15 cm. de distancia.

**Sistema de fijación mediante 3 cinchas humerales**, enhebradas en 3 hebillas mariposa con cierre micrograncho y tope ancla: aseguran un ajuste fácil, cómodo y seguro.

Humerux EVOH300

Tallas

Corto

S	18-26 cm	25 cm
M	26-34 cm	27 cm
L	34-42 cm	29 cm
XL	42-50 cm	32 cm

Tallas

Largo

S	18-26 cm	30 cm
M	26-34 cm	32 cm
L	34-42 cm	34 cm
XL	42-50 cm	36 cm

**A** Rango (contorno parte superior del brazo)

**B** Longitud de la ortesis

Bilateral