



*Nouvelles tailles.
Une meilleure adaptation*

Humerux

Orthèse humérale



Contrôle maximum

Nouvelles tailles.
Une meilleure adaptation

Humerux

Orthèse humérale



HUMERUX est une nouvelle orthèse qui offre un contrôle maximal pour les lésions de l'humérus, grâce à son innovant système de traction.

Indiqué pour le traitement des fractures diaphysaires de l'humérus, traitement post-opératoire des fractures et contrôle de l'instabilité des fractures au cours du processus de consolidation.




Y-traction system

Contrôle maximum

Le système exclusif Y-traction utilise un dispositif de traction qui permet d'augmenter et d'ajuster la tension, aidant à maximiser le contrôle de l'alignement, de la fixation et de l'immobilisation de l'humérus.

Tissu technique aéré et capitonné: confortable et respectueux avec la peau.

100% LATEX FREE

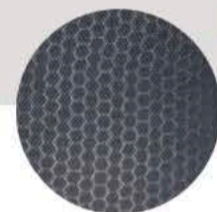

Structure bivalve avec plaques thermoformables amovibles, en PE de haute densité: peuvent être adaptés par chaleur pour obtenir une parfaite adaptation anatomique au patient.

* On peut donner forme aux valves avec un pistolet à air chaud à 150°C et à environ 15 cm. de distance

Les valves et sangles stabilisent l'humérus en appliquant une compression uniforme et personnalisée aux tissus mous environnants.

Sangle pectorale qui empêche l'orthèse de glisser vers le bas. Incorpore un support rembourré qui s'adapte confortablement à l'aisselle évitant tout type de friction ou d'inconfort.

Système de fixation grâce à 3 sangles humérales, enfilées dans 3 boucles papillon avec fermeture micro-crochet et arrêt d'ancrage: elles assurent un ajustement facile, confortable et sûr.




Humerux
EVOH300


Tailles

Court

S
M
L
XL

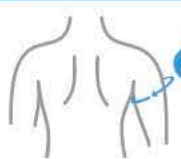

18-26 cm
26-34 cm
34-42 cm
42-50 cm

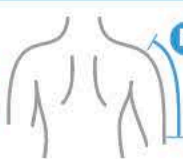


25 cm
27 cm
29 cm
32 cm

Tailles

Long

S
M
L
XL

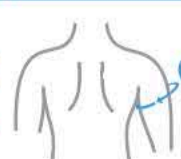

18-26 cm
26-34 cm
34-42 cm
42-50 cm



30 cm
32 cm
34 cm
36 cm

A Mesure (contour de la partie supérieure du bras)

B Longueur de l'orthèse

Bilatéral