



NOUVEAUX CORSETS RIGIDES
PRS666 / PRS660 / PRS661


Primospine

FOCUSBRACE

Nouvelles orthèses LSO et TLSO de forme bivalve, faciles à mettre en place et sans besoin de moulage.

Leur action se concentre sur la limitation de la mobilité pour, conjointement au confort qu'elles procurent, obtenir une meilleure adhérence thérapeutique.

Immobilisation et confort, en harmonie.

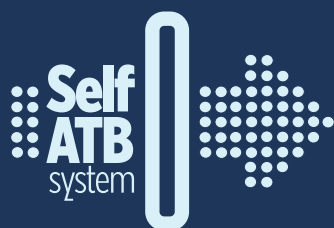

Primospine

FOCUSBRACE


NOUVEAUX CORSETS RIGIDES

PRIMSPINE Focusbrace favorise la correction de l'hyperlordose grâce à la pression intra-abdominale exercée par sa structure, obtenant un haut degré de soulagement, de stabilisation et d'immobilisation lombaire.

● Corsets de forme bivalve

La structure postérieure se superpose latéralement sur la structure antérieure de manière sûre, grâce à un micro-crochet.

Facile à placer, même chez les patients post-chirurgicaux et alités.

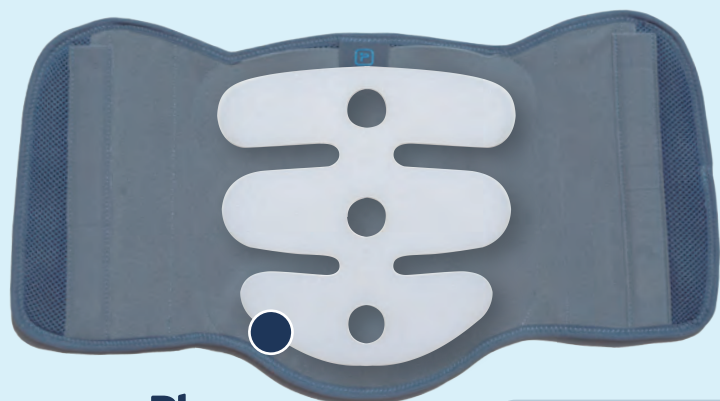


Plaquette frontale

En forme de soufflet qui s'adapte à tout type d'abdomen.

Structure avant

Sangles de régulation antéro-postérieures

Sangles élastiques de réglage avant-arrière qui se fixent sur son système exclusif de boucles **Self-ATB System**.

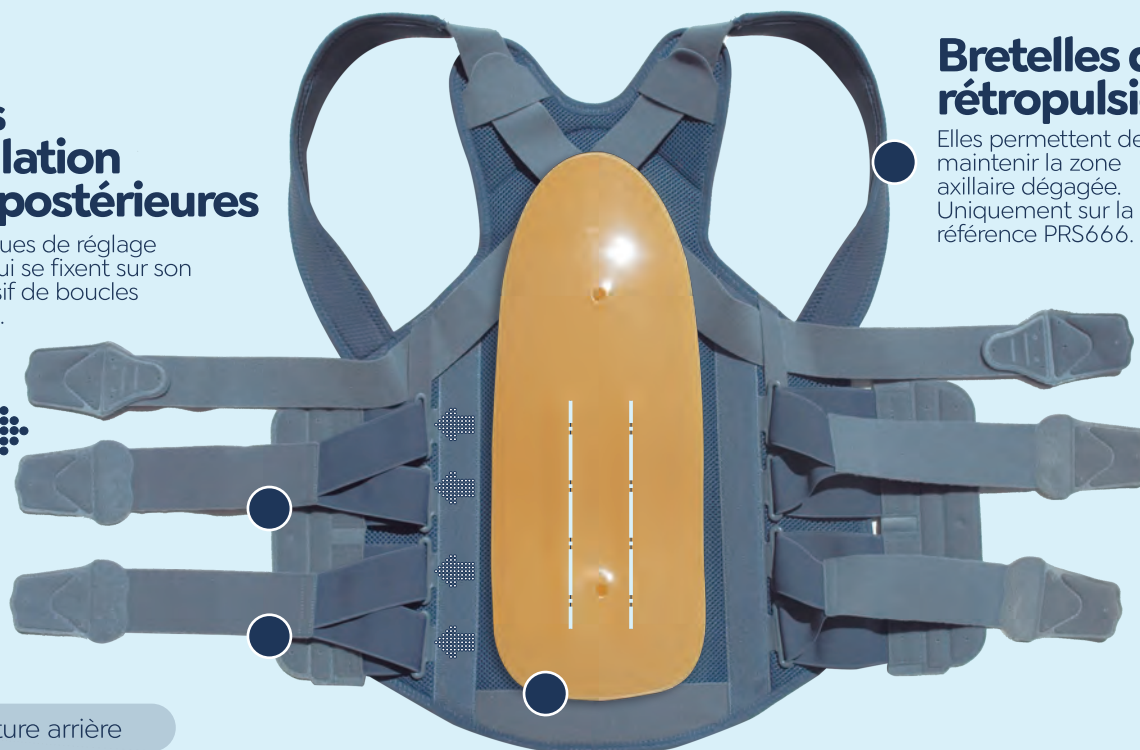


Structure arrière

Bretelles de rétroimpulsion

Elles permettent de maintenir la zone axillaire dégagée. Uniquement sur la référence PRS666.

Plaquette arrière


Avec renforts paravertébraux, placés entre 2 baleines métalliques pour assurer une meilleure stabilisation et immobilisation lombaire. Facile à former par pistolet à air chaud.

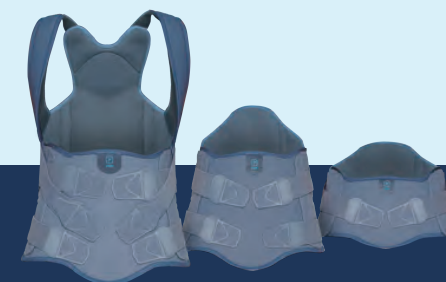

Immobilisation et confort, en harmonie.

Primospine

FOCUSBRACE

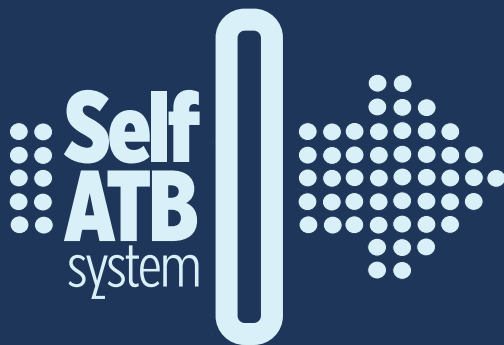

Système de boucles qui permet une répartition uniforme de la tension, favorisant l'adaptation et le confort.

Tissu matelassé 3D

Tissu matelassé 3D résistant et aéré, avec rembourrage et tissu en coton confortable et doux au toucher.



Aérée
Sans latex



Primspine FOCUSBRACE

Corset rigide lombosacré (LSO) Haut



PRS660 ●

Taille/Rang de tailles	A cm.	B cm.
S	80-90	27,5 39
M	88-100	27,5 39
L	98-110	28,5 39
XL	108-120	29,5 39

Indications :

Hernie discale, ostéoporose, spondylarthrose, spondylolisthésis avec ou sans stabilité, traumatisme, fracture par compression, discopathie dégénérative, fusion postopératoire et douleur musculaire chronique.



Prise de mesures :
contour hauteur du bassin



A: Hauteur avant
B: Hauteur dos





Primospine

FOCUSBRACE

Corset rigide lombosacré (LSO)
Bas




PRS661 ●

Taille/Rang de tailles	A cm.	B cm.
S 80-90	19	28
M 88-100	19	28
L 98-110	19	28
XL 108-120	19	28

Indications :

Hernie discale, ostéoporose, spondylarthrose, spondylolisthésis avec ou sans stabilité, traumatisme, fracture par compression, discopathie dégénérative, fusion postopératoire et douleur musculaire chronique.

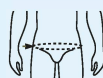

Prise de mesures :
contour hauteur du bassin



A: Hauteur avant
B: Hauteur dos



Primspine

FOCUSBRACE

Corset rigide thoraco-lombosacré (TLSO)



PRS666


Taille/Rang de tailles	A cm.	B cm.
S 80-90	27,5	51
M 88-100	27,5	51
L 98-110	28,5	51
XL 108-120	29,5	51

Indications :

Hernie discale, ostéoporose, spondylarthrose, spondylolisthésis avec ou sans stabilité, traumatisme, fracture par compression, discopathie dégénérative, fusion postopératoire, douleur musculaire chronique et prévention de la sténose du canal chez les patients alités.



Prise de mesures :
contour hauteur
du bassin

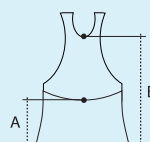

A: Hauteur avant
B: Hauteur dos

