



NOVOS COLETES RÍGIDOS
PRS666 / PRS660 / PRS661


Prim spine

FOCUSBRACE

*Novas ortóteses LSO e TLSO
em forma bivalve, fáceis de colocar
e sem necessidade de moldes.*

Projetados para limitar a mobilidade,
confortáveis, conseguem uma melhor
adesão ao tratamento.

Imobilização e conforto em harmonia.

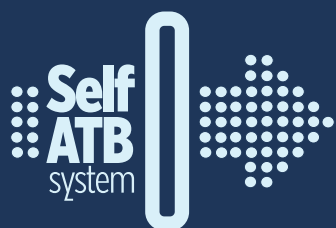

Nível estabilização


Primspine FOCUSBRACE

NOVOS COLETES RÍGIDOS

A **PRIMSPINE Focusbrace** promove a correção da hiperlordose, devido à pressão intra-abdominal exercida pela sua estrutura, conseguindo um elevado grau de descarga, estabilização e imobilização lombar.

Coletes com forma bivalve

A estrutura posterior sobrepõe-se lateralmente sobre a estrutura anterior de uma forma segura através de um sistema de fixação de velcro. **Fácil de colocar, mesmo para pacientes pós-cirúrgicos e acamados.**

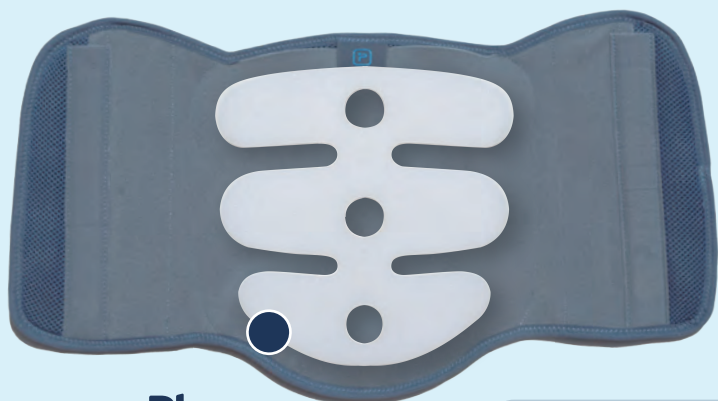

Placa frontal

Especialmente projetado para se adaptar a qualquer abdômen.

Estrutura anterior

Correias de regulação ântero-posterior

Correias elásticas de regulação ântero-posterior para unir ao sistema de fivelas **Self-ATB System** exclusivo.



Estrutura posterior




Alças retropulsivas

Mantêm a zona das axilas livre. Só na referência PRS666.

Placa traseira


Com nervuras de reforço paravertebral, posicionadas entre dois suportes metálicos para uma maior estabilização e imobilização lombar. Moldável com pistola de ar quente.

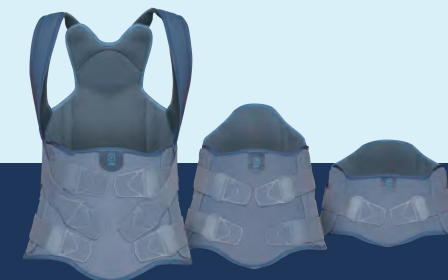

Imobilização e conforto em harmonia.

Primospine


FOCUSBRACE

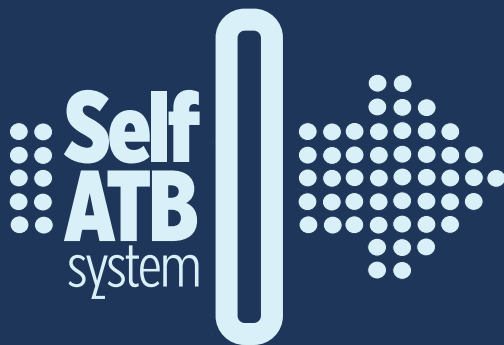

Sistema de fivelas que permite uma distribuição uniforme das tensões, favorecendo a adaptação e o conforto.

Tecido acolchoado 3D

Tecido acolchoado 3D resistente e respirável, com almofadado e tecido de algodão confortável em contacto com a pele.

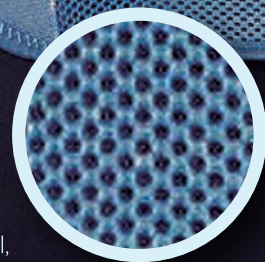

Respirável
Sem látex

Primspine FOCUSBRACE

Ortótese sacrolombar rígida (LSO)




PRS660 ●


Tamanho/Faixa de tamanho	A cm.	B cm.
S 80-90	27,5	39
M 88-100	27,5	39
L 98-110	28,5	39
XL 108-120	29,5	39

Indicações:

Hérnias discais, osteoporose, espondiloartrose, espondilólise com ou sem estabilidade, traumatismo, fraturas por compressão, doenças degenerativas dos discos, fusão pós-operatória e doença crónica muscular.

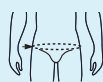

Onde medir:
contorno de altura pélvica

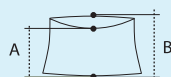

A: Altura frontal
B: Altura posterior





Primospine

FOCUSBRACE

Ortótese sacrolombar rígida (LSO)




Tamanho/Faixa de tamanho	A cm.	B cm.
S 80-90	19	28
M 88-100	19	28
L 98-110	19	28
XL 108-120	19	28


PRS661 ●

Indicações:

Hérnias discais, osteoporose, espondiloartrose, espondilólise com ou sem estabilidade, traumatismo, fraturas por compressão, doenças degenerativas dos discos, fusão pós-operatória e doença crónica muscular.

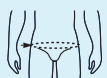

Onde medir:
contorno de altura pélvica

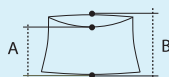

A: Altura frontal
B: Altura posterior



Primspine

FOCUSBRACE

Ortótese torácico sacrolombar rígida (TLSO)



PRS666


Tamanho/Faixa de tamanho	A cm.	B cm.
S 80-90	27,5	51
M 88-100	27,5	51
L 98-110	28,5	51
XL 108-120	29,5	51

Indicações:

Hérnias discais, osteoporose, espondiloartrose, espondilólise com ou sem estabilidade, traumatismo, fraturas por compressão, doença degenerativa dos discos, fusão pós-operatória, doença crónica muscular e prevenção da estenose do canal em doentes acamados.



Onde medir:
contorno de altura pélvica

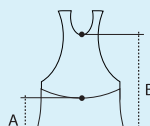

A: Altura frontal
B: Altura posterior

