



*Protector Torácico **Ecoprim**
de compresión continua*

100% LATEX FREE ✓




*Protector
torácico*

Ecoprim

***Ambos modelos están indicados
para el post-operatorio de cirugía
cardíaca y torácica.***

Este producto también está recomendado para pacientes con enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, demencia, etc. en la que no se puede realizar una gestión autónoma de la compresión puntual por parte del paciente.


Permiten que los pacientes que no tienen la capacidad de ejercer compresión a demanda puedan estar protegidos correctamente durante todo su proceso de recuperación.

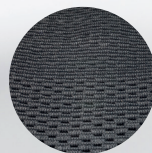

Fabricado en
tejido de rejilla
de celda
abierta



Transpirable

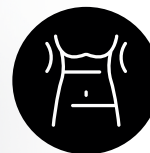

Adaptación a
la anatomía del
paciente




Materiales
elásticos e
inelásticos
para
adaptación
perfecta

El diseño de estos nuevos protectores **permite que el especialista pueda realizar un ajuste de la compresión antes de que el paciente vuelva a casa**, y éste puede retirarse el protector y volvérselo a poner sin necesidad de modificar la compresión que el especialista ha considerado apropiada.

Gracias a su **nuevo diseño** el paciente no tiene que realizar **ningún movimiento brusco** a la hora de ponerse y quitarse el protector. La zona de los tirantes, dispone un cierre mediante hebillas que permiten un ajuste, eficaz, seguro y confortable.

El protector torácico cuenta con **cierres delanteros mediante hebillas de cierre clic** sobre la parte del pecho, que se abren al presionar sobre los laterales, de forma que **no se ejerza nunca presión sobre la herida**, así como si fuese necesaria su apertura de urgencia, permitiendo abrir el protector en apenas unos segundos.

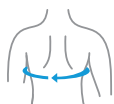

Tallas y toma de medidas

ECOPRIMCCM *mujer*

Talla	Contorno tórax
1	75 - 105 cm
2	105 - 135 cm

No guarda lado

ECOPRIMCCU *uniSex*

Talla	Contorno tórax
1	70 - 100 cm
2	100 - 130 cm

No guarda lado

Ambos modelos han sido desarrollados en dos tallas:



Protector torácico **Ecoprim** de compresión continua *mujer*

ECOPRIMCCM

Protector torácico Ecoprim de compresión continua especialmente diseñado para mujeres.

La **almohadilla** central protege la herida

Cinchas que pasan sobre y bajo las mamas, permitiendo un **ajuste perfecto** y permite realizar una **correcta regulación de la compresión ejercida**

Hebillas de **cierre clic** para **apertura muy rápida**

- Permite realizar una **compresión sobre el tórax liberando el pecho femenino**, de forma que aporte seguridad a los pacientes para hacer una vida normal hasta su recuperación.
- La **almohadilla central** protege la herida de cualquier presión o roce indeseado.
- Las cinchas rodean el pecho por encima y por debajo, permitiendo de este modo realizar una **correcta regulación de la compresión ejercida liberando en todo momento el pecho y evitando cualquier tipo de compresión sobre él.**
- **Colocación sencilla e intuitiva** para el paciente, para ello se ha concebido con un diseño tipo chaleco.
- **Zonas almohadilladas** que permiten acolchar al mismo tiempo que se comprime, **para un mayor confort.**
- Las **hebillas centrales** quedan colocadas sobre la almohadilla central evitando cualquier posible contacto con la herida.



Protector torácico **Ecoprim** de compresión continua *unisex*

ECOPRIMCCU



Almohadillas laterales que apoyan sobre el pectoral,

Cinchas que permiten un ajuste perfecto y una correcta regulación de la compresión ejercida

Hebilla de cierre clic para apertura muy rápida

Protector torácico Ecoprim
continua unisex.

Permite realizar una **compresión sobre el tórax**, de forma que aporte seguridad a los pacientes para hacer una vida normal hasta su recuperación.

Este producto **puede ser utilizado tanto por hombres como por mujeres.**

Dispone de **dos almohadillas laterales** que apoyan sobre el pectoral, liberando la zona de la herida.

Colocación sencilla e intuitiva para el paciente, para ello se ha concebido con un diseño tipo chaleco.

Zonas almohadilladas que permiten acolchar al mismo tiempo que se comprime, **para un mayor confort.**

Dispone de **dos hebillas centrales** que no entran en contacto con el paciente gracias a las almohadillas laterales, evitando de este modo que puedan entrar en contacto con la herida ni realizar cualquier tipo de presión sobre la misma.



C/ Yolanda González, 15 - Pol. Ind. N°. 1
28938 Móstoles - Madrid - SPAIN

Tel. : (+34) 913 342 532 / (+34) 913 342 539
e-mail: export@prim.es



<https://international.prim.es/>